


Autoclave // Sterilizer

MANUALES Y DIGITALES // MANUAL AND DIGITAL

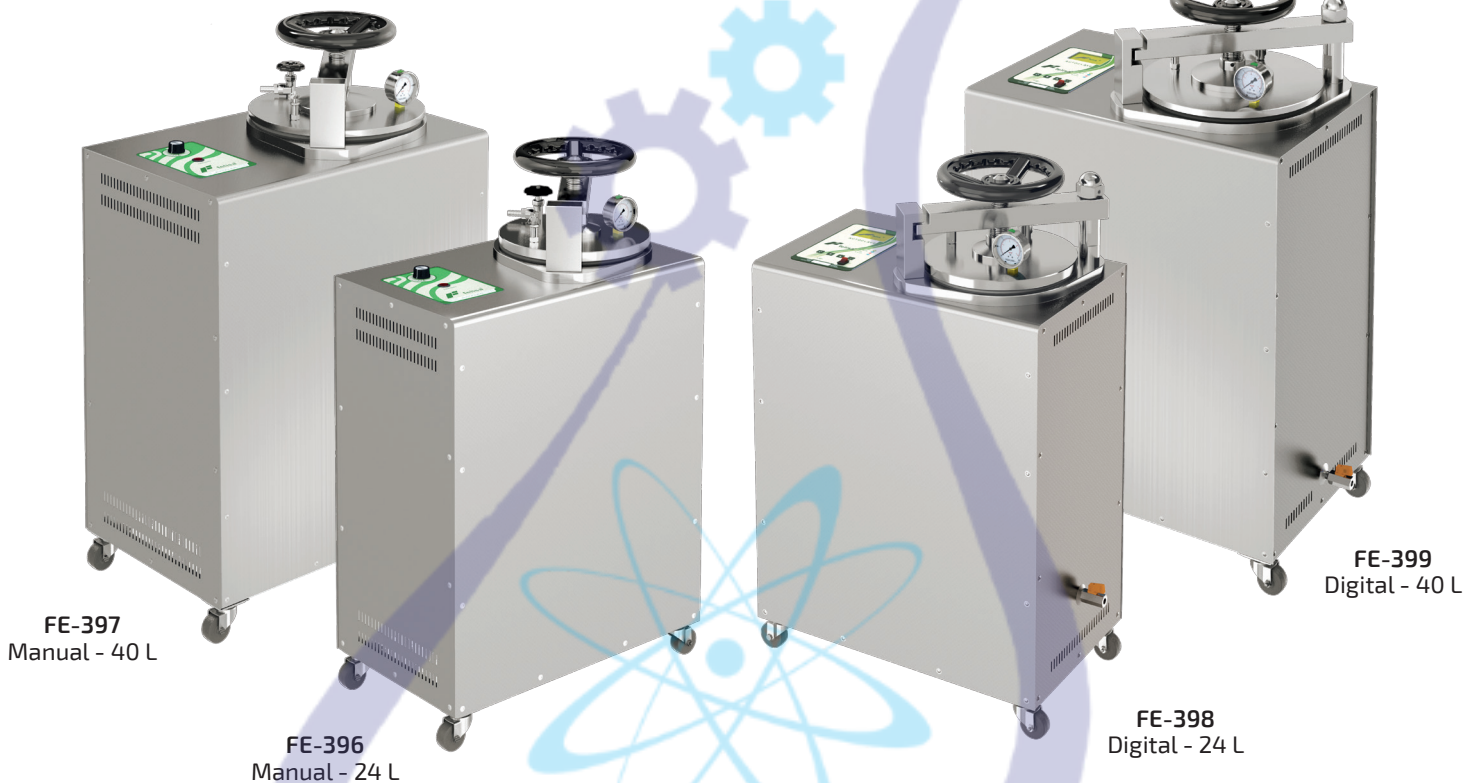

La autoclave **Felisa®** es rápida, confiable y segura. Su línea de controles automáticos brinda mayor estabilidad, control en el proceso y un **alto grado de precisión de 100 a 132° C.**

Óptima funcionalidad, precisión y rapidez al esterilizar cualquier material normalmente procesado con autoclave en laboratorios, hospitales, clínicas, industrias, etc. Su tapa de desplazamiento lateral puede ser abierta con gran facilidad. Modelos automáticos con óptimas condiciones de esterilización, temperatura controlada con un alto grado de precisión de 100 a 132° C, por un control digital microcontrolado y sensor Pt-100 con capacidad para almacenar cinco programas de esterilización, pantalla LCD para observar temperatura y presión de operación, temperatura programada, tiempo de ciclo, estado de proceso, gráfica P vs t, gráfica T vs t y opción a seleccionar dos niveles de usuario. Resolución de 1° C.

Características

- La línea de controles automáticos de temperatura brinda además mayor estabilidad, control en el proceso y un alto grado de precisión de 116° C a 132° C. Resolución de 1° C.
- Display gráfico.
- Control PID.
- Sensor de temperatura Pt-100.
- Alarmas para límites alto y bajo de temperatura, detección de fallas y bajas de voltaje.
- Tiempo programable de 0 a 99 minutos.

- Selección de idioma y unidades de operación.
- Cinco ciclos programables en tiempo y temperatura.
- Gráfica en tiempo real del estado del ciclo.
- Almacenamiento de datos de ciclo en memoria USB (opcional).
- Desfogue programable continuo o intermitente.
- Sensor digital de presión.
- Sistema de protección por sobre temperatura y sobre presión.



Vista superior de autoclave digital modelo **FE-399**, de 66.0 x 40.0 cm y 101.0 cm de altura; capacidad de 40 litros. / Top view of digital autoclave model **FE-399**, 66.0 x 40.0 cm and 101.0 cm high; 40 liter capacity.