

Termobaño // Water bath


ANALÓGICOS Y DIGITALES // ANALOG AND DIGITAL

MODELOS DIGITALES / DIGITAL MODELS

Los termobaños **Felisa®** únicos por su calentamiento eficiente, rápido y excepcionalmente uniforme.



FE-375 Modelo Digital

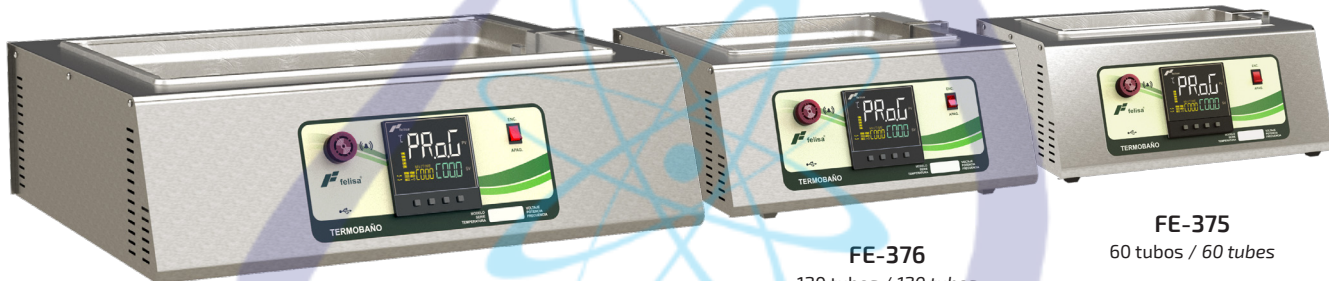

FE-377
240 tubos / 240 tubes

FE-376
120 tubos / 120 tubes

FE-375
60 tubos / 60 tubes

Construido totalmente en acero inoxidable, su tina de una sola pieza evita fugas y corrosión; el elemento calefactor inmerso proporciona un calentamiento eficiente, rápido y excepcionalmente uniforme, con rango de operación de temperatura ambiente +5 a 100 °C y con capacidad de 60, 120 y 240 tubos. Ideal para numerosas aplicaciones en laboratorios, hospitales, industrias, etc.

Características

- Control digital microcontrolado con pantalla LCD, para observar temperaturas de operación programada, tiempo del ciclo y estado del proceso.
- Fácil programación en el control de temperatura ahora incorporado con sistema "Auto-tuning".
- Sistema con alarmas de seguridad con límite alto y bajo de temperatura.

- Sistema de detección de fallas.
- Timer hasta 75 horas.
- Hasta 16 perfiles de temperatura y control de rampas.
- Comunicación digital USB, mediante software de adquisición de datos y graficado.
- Modelo analógico con perilla de control (termómetro necesario).
- Tapa y gradillas para 60 tubos tamaño estándar en acero inoxidable (se cotizan por separado).

Constructed entirely of stainless steel, one piece tank, easy to clean, no seams to leak or corrode, the immersed heating element gives efficient, rapid and exceptional temperature uniformity. Operate from ambient temperature +5° to 100° C, with capacity for 60, 120 and 240 tubes. Ideal for many lab applications where uniform bath temperature is required.

Modelo	Control	Tamaño	Capacidad	Tubos	Estabilidad	Voltios	Watts	Amperes	Dimensiones WxDxH*	Tina WxDxH	Peso	Tapa
Model	Control	Size	Capacity	Tubes	Stability	Volts	Watts	Amps	Dimensions WxDxH*	Tab WxDxH	Weight	Cover
FE-371	Analógico	Chico/S	6 L	60	± 0.3° C	120	360	3	41.0 x 38.0 x 19.0 cm	30.0 x 15.0 x 15.0 cm	5.0 Kg	FE-382
FE-372	Analógico	Mediano/M	10 L	120	± 0.3° C	120	500	4.2	41.0 x 42.0 x 19.0 cm	30.0 x 24.0 x 15.0 cm	6.0 Kg	FE-383
FE-373	Analógico	Grande/L	20 L	240	± 0.3° C	120	1,000	8.3	61.0 x 47.0 x 19.0 cm	30.0 x 50.0 x 15.0 cm	8.6 Kg	FE-384
FE-375	Digital	Chico/S	6 L	60	± 0.2° C	120	360	3	41.0 x 33.0 x 19.0 cm	30.0 x 15.0 x 15.0 cm	5.8 Kg	FE-382
FE-376	Digital	Mediano/M	10 L	120	± 0.2° C	120	500	4.2	41.0 x 42.0 x 19.0 cm	30.0 x 24.0 x 15.0 cm	6.5 Kg	FE-383
FE-377	Digital	Grande/L	20 L	240	± 0.2° C	120	1,000	8.3	61.0 x 47.0 x 19.0 cm	30.0 x 50.0 x 15.0 cm	8.7 Kg	FE-384

*WxDxH: Ancho x profundidad x alto / Width x depth x height.

Temperatura ambiente: + 5° a 100° C / Ambient temperature: + 5 to 100° C